

Система очистки Reveleris® PREP Флэш-хроматография и препаративная ВЭЖХ

Система очистки Reveleris® PREP представляет собой мощную высокопроизводительную систему, объединяющую флэш-хроматографию и препаративную ВЭЖХ в одном приборе с интуитивно понятным управлением.

Усовершенствованная система с двумя режимами удовлетворяет потребности клиентов, работающих как в области органической химии, так и с препаративной ВЭЖХ, ускоряя процессы очистки.

Простота

Программирование в одном окне и управление через интуитивно понятный интерфейс Windows® ускоряет настройку системы









Универсальность

Флэш-хроматография и препаративная ВЭЖХ в одной системе



Удобство эксплуатации

Полный контроль над процессом очистки разнообразных образцов




Reveleris® PREP

Идеальна для флэш-хроматографии и препаративной ВЭЖХ




Характеристики:

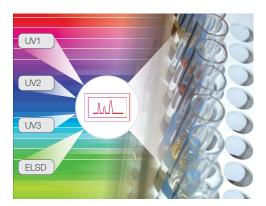


Технология детектирования RevealX™

- · Упрощает сбор фракций
- Сокращает затраты на последующую обработку фракций
- Максимальное восстановление целевых веществ

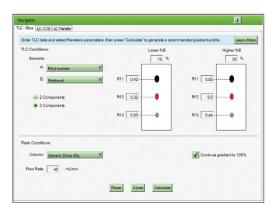

Программное обеспечение REVELERIS® NAVIGATOR™

- · Повышение заданной степени чистоты и восстановления
- Упрощение оптимизации метода
- · Сокращение расхода растворителей/снижение стоимости
- · Сокращение длительности цикла

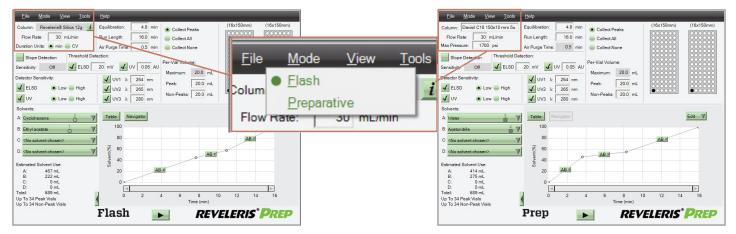

Окно флэш-режима


Окно ВЭЖХ режима

Простое переключение между флэш-режимом и препаративной ВЭЖХ

Простое переключение между флэш-режимом ВЭЖХ простым прикосновением к дисплею. Нет необходимости в дополнительных аппаратных соединениях для переключения между режимами.

Применение

Выделение чистых соединений из экстракта натуральных образцов обычно выполняется при помощи хроматографии. Reveleris® Prep объединяет флэш-хроматографию и препаративную ВЭЖХ (HPLC) в одном приборе и тем самым гарантирует высокоэффективную очистку целевого соединения.

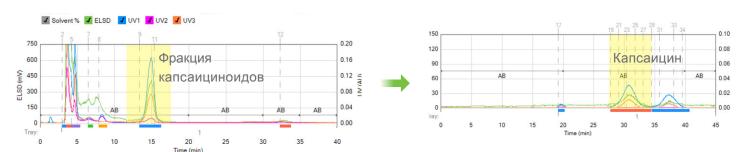

Предварительная очистка экстракта кожуры красного перца чили при помощи флэш-хроматографии с нормальной фазой.

Разделение с высоким разрешением с помощью обращенно-фазовой препаративной ВЭЖХ.

Reveleris® PREP: ваши основные преимущества



Универсальность

- · Выбор между флэш-хроматографией и препаративной ВЭЖХ
- Использование флэш-картриджей и колонок для препаративной ВЭЖХ
- · До 200 мл/мин во флэш- и препаративном режиме
- · До 120 бар (1700 psi) в режиме ВЭЖХ
- · 3 настраеваемых канала детекции UV-Vis и ELSD
- Распознавание хромофоров и нехромофоров



Простота

- Интуитивно понятный и простой интерфейс ПО
- Большой сенсорный дисплей 12" системы управления
- · Переключение одним кликом между флэш-хроматографией и препаративной ВЭЖХ
- · Нет необходимости тратить время на замену жидкостей
- Простота установки картриджа и колонки



Удобство эксплуатации

- · Контроль над вашим образцом до окончания очистки
- Выбор чувствительности детектора одним кликом
- Выбирайте фракции и способ сбора
- · Выбирайте скорость и/или степень очистки
- Самостоятельно управляйте всем процессом очистки

Расширьте возможности вашей лаборатории



Осушитель воздуха Reveleris®

Генерация очищенного воздуха



Стеклянные колонки

Колонки для масштабирования



Флэш-картриджи Reveleris®

Получите максимум от своей флэш-очистки



Rotavapor® R-300

Удобное и эффективное ротационное упаривание

